


# Ureter-Dauerschienen »HYDROPUR®«

*Ureteral Stent*  
»HYDROPUR®«

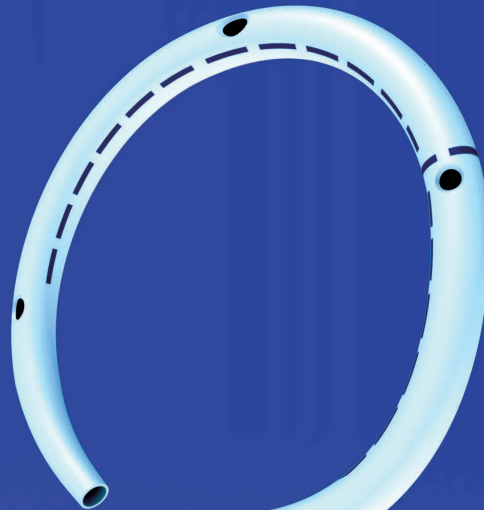

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE

# EDITORIAL



Die Ureter-Dauerschiene »HYDROPUR®« überzeugt durch ihre extreme Gleitfähigkeit, die Beständigkeit während ihrer Verweilzeit und das einfache Handling. Die Schienen sind in fein abgestuften Größen erhältlich sowie als steuerbare Ausführung oder mit Pusher und Applikationsfaden.

Die Materialfestigkeit in Verbindung mit kleinen, tangential versetzten, atraumatischen Drainage-Augen ermöglicht eine komplikationsfreie Applikation. Die konisch angeformte Spitze des Nierenpigtails ermöglicht ein sehr gutes Vorschieben der Ureter-Dauerschiene.

## Unser Material

Aus gutem Grund haben wir uns bei der UROMED Ureter-Dauerschiene »HYDROPUR®« für aromatisches Polyurethan entschieden. Es erfüllt die hohen Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, Zugfestigkeit und Formstabilität sowie gute Memory-Eigenschaften in idealer Weise. Eine Abrundung dieser Merkmale erfolgt durch die spezielle Fertigungstechnik und Vergütung der Oberfläche, die sich in einer sehr guten Gleitfähigkeit und geringer Inkrustationsneigung widerspiegeln.

Daher ist die UROMED Ureter-Dauerschiene »HYDROPUR®« für die Langzeitdrainage geeignet, wobei die individuelle Inkrustationsneigung des Patienten zu berücksichtigen ist.

*Our Ureteral Stent »HYDROPUR®« convinces by its high gliding ability, stability during the indwelling time and easy handling. The stents are available in finely graduated sizes as well as manoeuvrable versions or with pusher and application thread.*

*The rigidity of material in combination with small, tangentially placed, atraumatic eyes enables a complication-free placement. The dilating tip of the pigtail provides a good advancement of the stent.*

## Our Material

*With good reasons we have decided on aromatic polyurethane for the UROMED Ureteral Stent »HYDROPUR®«. This material ideally fulfills the high demands concerning flexibility, tensile strength, form stability and good memory effect. Additional to these features are the special manufacturing procedure and the refined surface which are reflected in an excellent ability of gliding and low incrustation rates.*

*Therefore the UROMED Ureteral Stent »HYDROPUR®« is suitable for long-term drainage but the individual incrustation rate of the patient has to be taken into consideration.*

# UROMED »HYDROPUR®« EXTERNE ABLEITUNG

## UROMED »HYDROPUR®« EXTERNAL DRAINAGE

REF 4465 – 4468

Zylindrische Spitze

Länge 70 cm


ohne Perforation im Ureterteil

*Closed tip*

*Length 70 cm*

*without perforation*

*in the ureteral part*

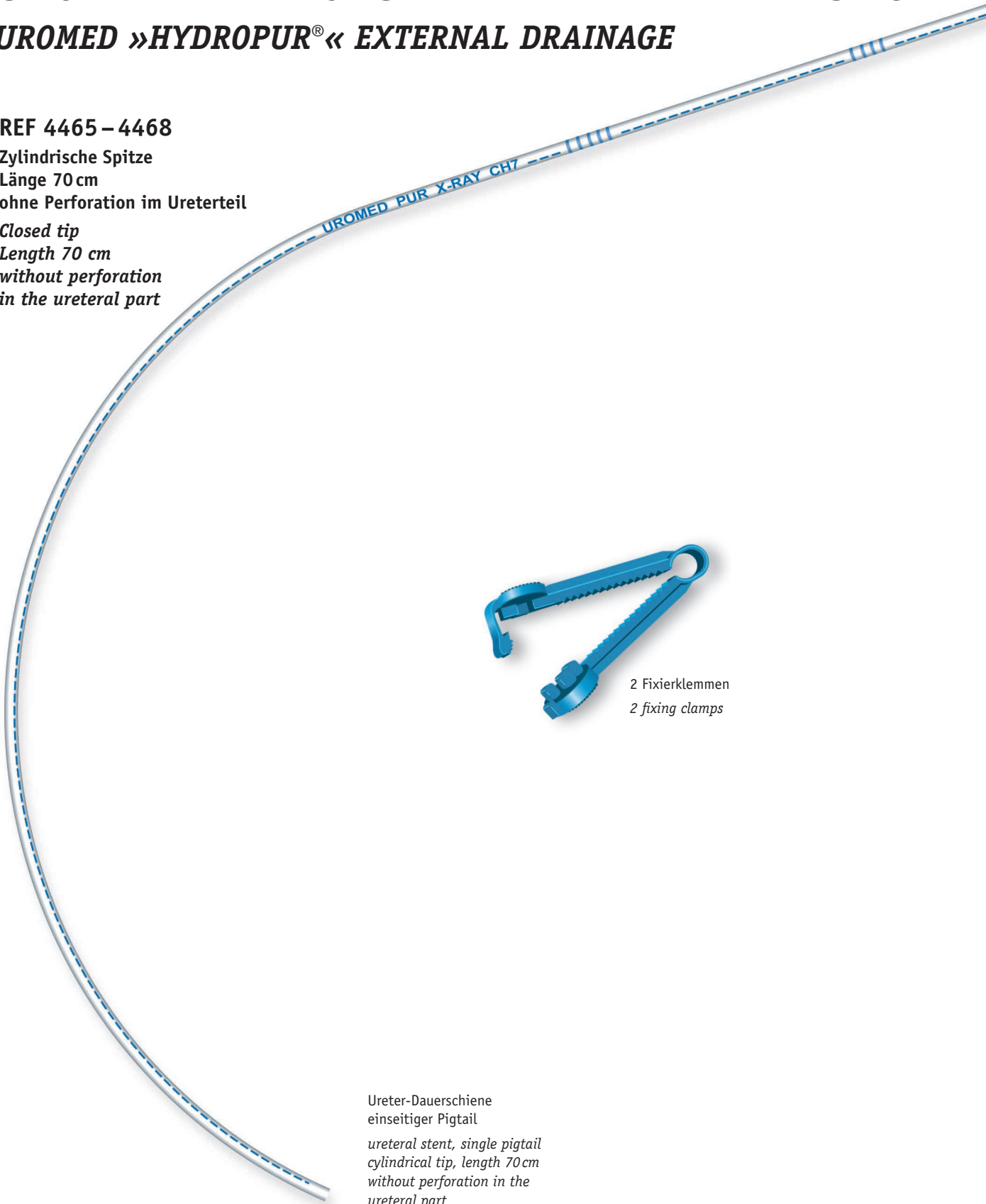


2 Fixierklemmen  
2 fixing clamps

Ureter-Dauerschiene  
einseitiger Pigtail

*ureteral stent, single pigtail  
cylindrical tip, length 70 cm  
without perforation in the  
ureteral part*



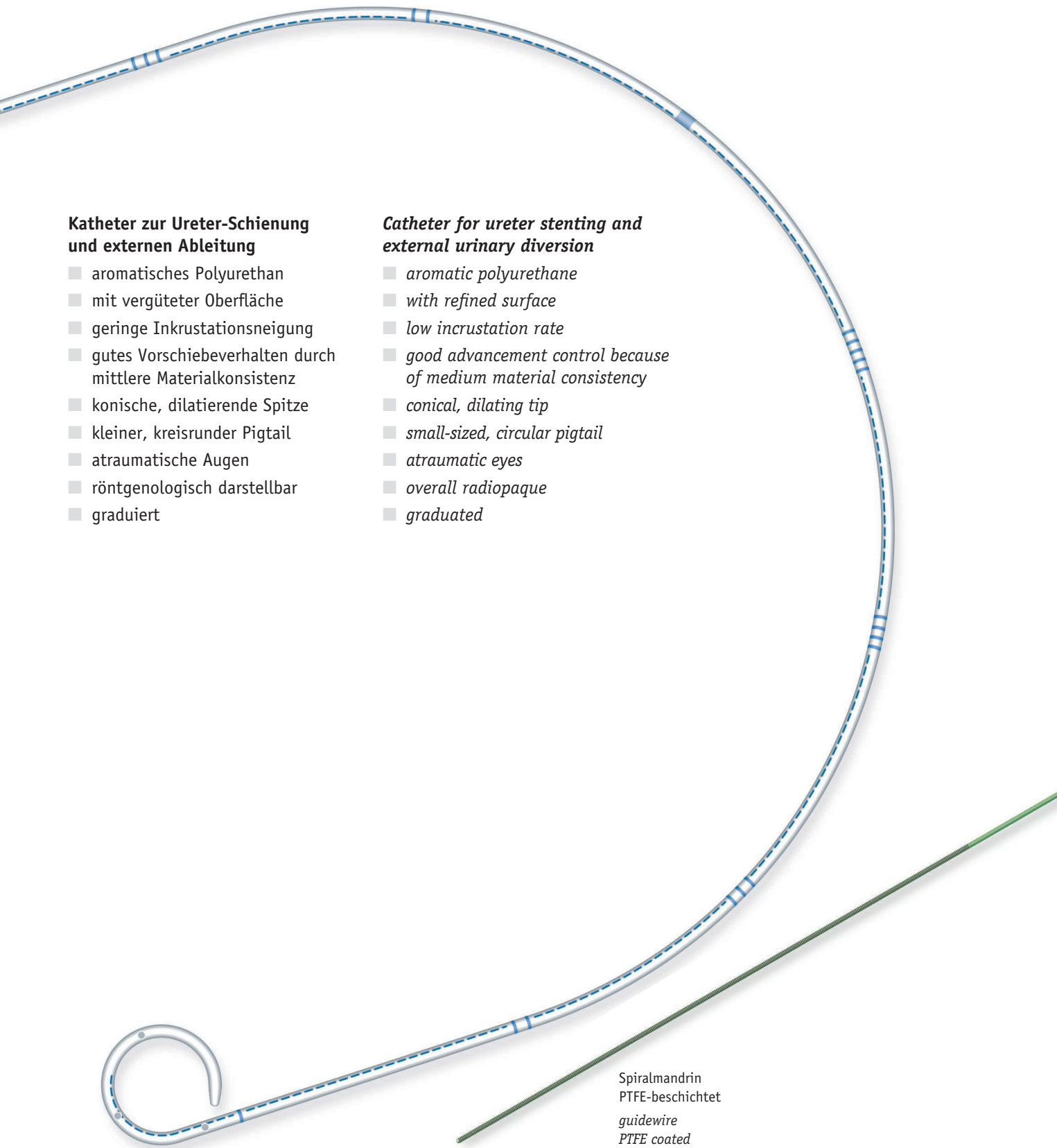

**Katheter zur Ureter-Schienung und externen Ableitung**

- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- gutes Vorschiebehaviorn durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleiner, kreisrunder Pigtail
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- graduiert

**Catheter for ureter stenting and external urinary diversion**

- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtail
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- graduated

Spiralmandrin  
PTFE-beschichtet  
guidewire  
PTFE coated

REF REF	Dauerschienne Stent	Mandrin Guidewire	PZN PZN
4465	Ch. 4,8 / 70 cm	0,028" / 150 cm	11371573
4466	Ch. 6,0 / 70 cm	0,035" / 100 cm	11371596
4467	Ch. 7,0 / 70 cm	0,035" / 100 cm	11371604
4468	Ch. 8,0 / 70 cm	0,038" / 100 cm	11371610

Verpackung: doppelt, steril  
Original-Karton: 10 Stück

Packing: double, sterile  
Original carton: 10 pieces

# UROMED »HYDROPUR®« EXTERNE ABLEITUNG

## UROMED »HYDROPUR®« EXTERNAL DRAINAGE

REF 4475 – 4479

Zentral offene Spitze

Länge 70 cm

ohne Perforation im Ureterteil

**Open tip**

**Length 70 cm**

**without perforation**

**in the ureteral part**

**Katheter zur Ureter-Schienung und externen Ableitung**

- Set zur Applikation in Seldinger-Technik
- aromatisches Polyurethan
- mit vergüteter Oberfläche
- geringe Inkrustationsneigung
- gutes Vorschiebehaviorhalten durch mittlere Materialkonsistenz
- konische, dilatierende Spitze
- kleiner, kreisrunder Pigtail
- atraumatische Augen
- röntgenologisch darstellbar
- graduert


**Catheter for ureter stenting and external urinary diversion**

- set for application in Seldinger-technique
- aromatic polyurethane
- with refined surface
- low incrustation rate
- good advancement control because of medium material consistency
- conical, dilating tip
- small-sized, circular pigtail
- atraumatic eyes
- overall radiopaque
- graduated



Ureter-Dauerschleife  
einseitiger Pigtail

*ureteral stent, single pigtail  
central open tip, length 70 cm  
without perforation in the  
ureteral part*

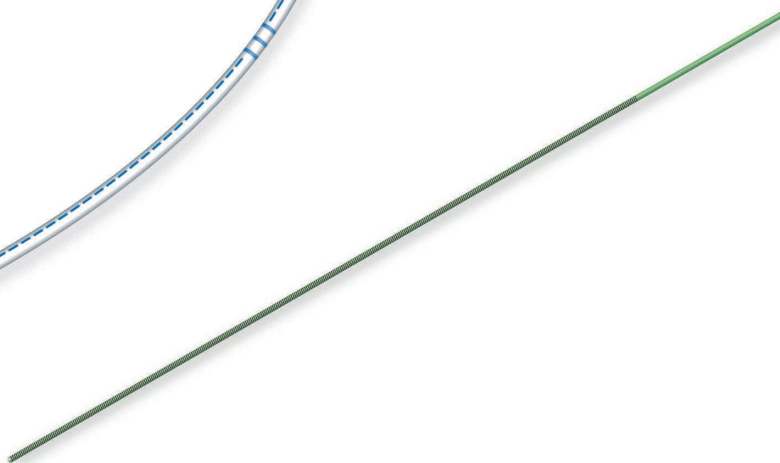

Spiralmantel  
PTFE-beschichtet

*guidewire  
PTFE coated*

REF REF	Dauerschleife Stent	Mantel Guidewire	PZN PZN
4475	Ch. 4,8 / 70 cm	0,028" / 150 cm	11371633
4476	Ch. 6,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371662
4477	Ch. 7,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371679
4478	Ch. 8,0 / 70 cm	0,035" / 150 cm	11371685
4479	Ch. 9,0 / 70 cm	0,038" / 150 cm	11371691

**Verpackung:** doppelt, steril  
**Original-Karton:** 10 Stück

**Packing:** double, sterile  
**Original carton:** 10 pieces

**UROMED Kurt Drews KG**  
**Meessen 7/11**  
**D-22113 Oststeinbek**

<b>Telefon</b>	<b>Zentrale Kliniken Praxen Apotheken/Handel</b>	<b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 0</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 11</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 21</b> <b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 31</b>
----------------	--	---

<b>Telefax</b>		<b>+49 (0) 40 / 7 13 007- 99</b>
----------------	--	----------------------------------

<b>Internet</b>		<b><a href="http://www.uromed.de">www.uromed.de</a></b>
-----------------	--	---

<b>E-Mail</b>		<b><a href="mailto:service@uromed.de">service@uromed.de</a></b>
---------------	--	---

Die Angaben entsprechen unserem  
Kenntnisstand bei Drucklegung.  
Produktänderungen aufgrund technischen  
Fortschrittes vorbehalten.

*All indications correspond to our know-  
ledge at the date of press.  
Due to technical progress all products are  
subject to change.*

Material-Nr. 0025 · Rev. 2 · 06/2020

© UROMED Kurt Drews KG

**UROMED**  
PRODUKTE FÜR DIE UROLOGIE